




making work easy

Anleitung • Instruction • Instruction • Istruzioni • Instrucciones  
Инструкцию

## EASY view 3D software update

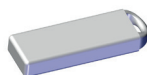

### 1. [www.renfert.de/.....](http://www.renfert.de/.....)



V1.0xx.zip



Die .zip Datei „V1\_0xx.zip“ öffnen und entpacken.


In dem entpacktem Ordner sind die Anleitung und das Firmware update enthalten.

### 2.



Den USB-Stick am Laptop anschließen.

### 3.

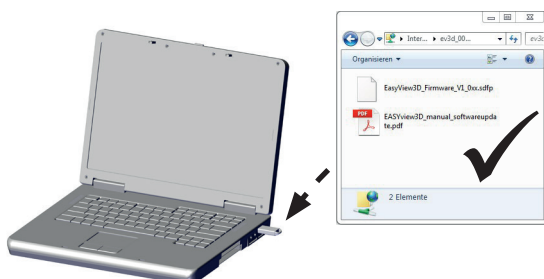

Die Datei mit dem Namen: „EasyView3D\_Firmware\_V1\_0xx.sdfp“ auf den USB-Stick des EASY view 3D kopieren.

Die Datei darf in keinem Unterordner gespeichert werden.


Es darf keine weitere .sdfp Datei auf dem USB-Stick vorhanden sein.

4.



Den USB-Stick am EASY view 3D anschließen.

5.

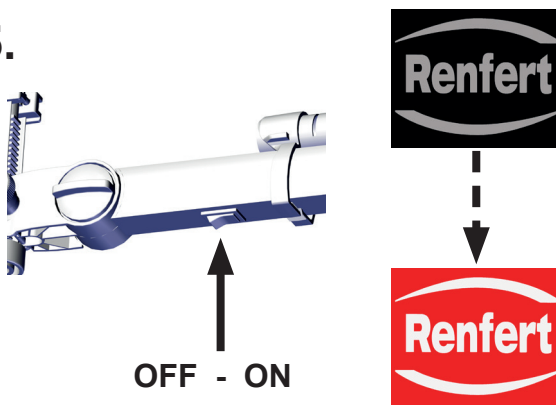


Das EASY view 3D aus und wieder einschalten.

Das Update läuft jetzt automatisch ab und wird durch ein animiertes graues Renfert-Logo angezeigt.

Das Update ist abgeschlossen, wenn das Renfert-Logo rot eingefärbt erscheint und das EASY view 3D automatisch neu startet.

6.

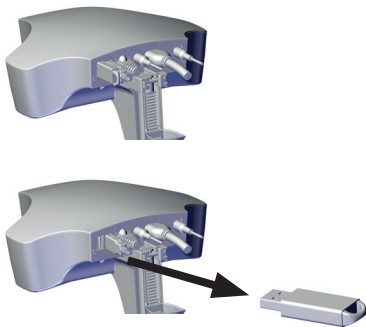

Der Updatevorgang ist somit abgeschlossen.


Der USB-Stick kann nun entfernt werden.



making work easy

Anleitung • Instruction • Instruction • Istruzioni • Instrucciones  
Инструкцию


## EASY view 3D software update

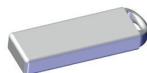

### 1. [www.renfert.de/.....](http://www.renfert.de/.....)



V1.0xx.zip

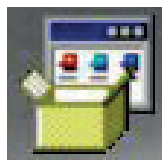

Open the .zip file "V1\_0xx.zip" and unzip it.


The unzipped folder contains the instructions and the firmware update.

### 2.



Connect the USB stick to the laptop.

### 3.

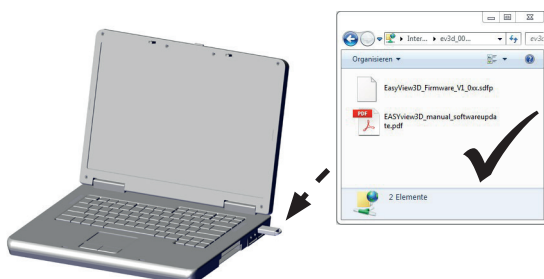

Copy the file named "EasyView3D\_Firmware\_V1\_0xx.sdfp" to the EASY view 3D USB stick.

The file may not be stored in any subfolder.


There may not be another .sdfp file on the USB stick.

4.



Connect the USB stick to the EASY view 3D.

5.

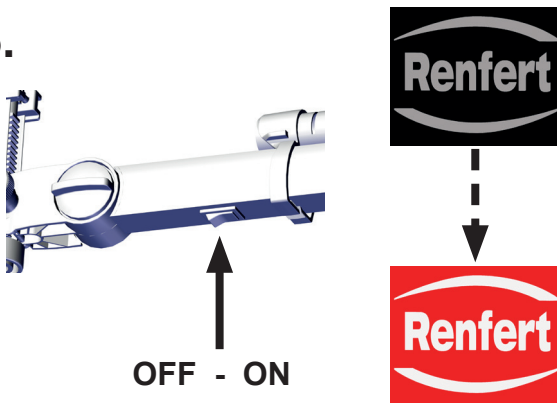


Switch the EASY view 3D off and on again.

The update now runs automatically and is indicated by an animated gray Renfert logo.

The update is complete when the Renfert logo appears colored red and the EASY view 3D restarts automatically.

6.

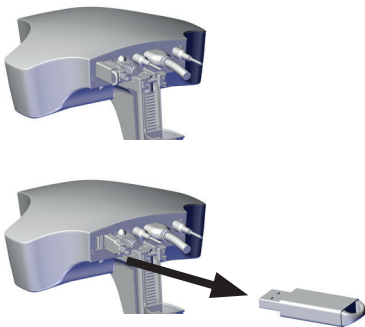

The update process is now complete.


The USB stick can now be removed.



making work easy

Anleitung • Instruction • Instruction • Istruzioni • Instrucciones  
Инструкцию


## EASY view 3D software update

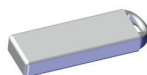

### 1. [www.renfert.de/.....](http://www.renfert.de/.....)



V1.0xx.zip

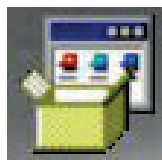

Ouvrir le fichier .zip « V1\_0xx.zip » et le décompresser.


Le dossier décompressé comprend les instructions et la mise à jour du micrologiciel.

### 2.



Brancher la clé USB sur l'ordinateur portable.

### 3.

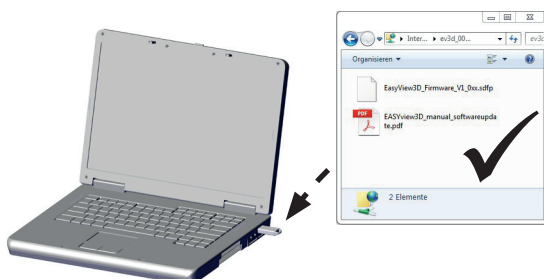

Copier le fichier nommé « EasyView3D\_Firmware\_V1\_0xx.sdfp » sur la clé USB de l'EASY view 3D.

Le fichier ne doit pas être enregistré dans un sous-dossier.


Aucun autre fichier .sdfp ne doit se trouver sur la clé USB.

4.



Brancher la clé USB sur l'EASY view 3D.

5.

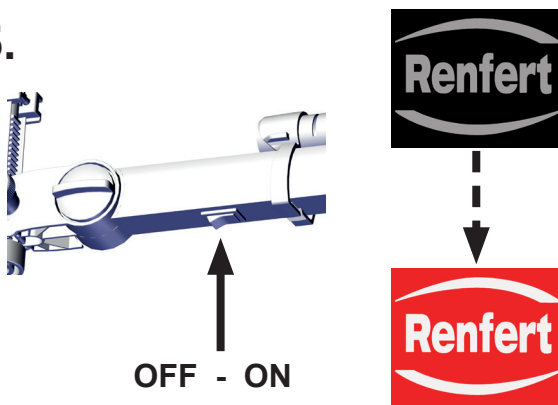


Éteindre puis rallumer l'EASY view 3D.

La mise à jour est effectuée automatiquement et est indiquée par un logo Renfert gris animé.

La mise à jour est terminée lorsque le logo Renfert est rouge et que l'EASY view 3D redémarre automatiquement.

6.

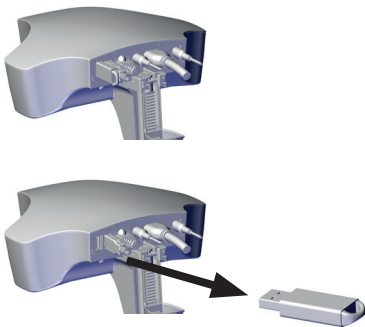

La procédure de mise à jour est alors terminée.


La clé USB peut à présent être débranchée.



making work easy

Anleitung • Instruction • Instruction • Istruzioni • Instrucciones  
Инструкции


## EASY view 3D software update

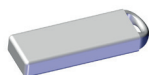

### 1. [www.renfert.de/.....](http://www.renfert.de/.....)



V1.0xx.zip

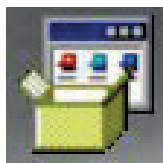

Aprire ed estrarre il file .zip „V1\_0xx.zip“.


Nella cartella estratta sono contenuti le istruzioni e l'aggiornamento del firmware.

### 2.



Collegare la chiavetta USB al laptop.

### 3.

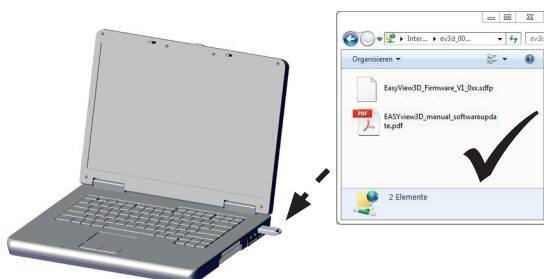

Copiare il file con il nome: „EasyView3D\_Firmware\_V1\_0xx.sdfp“ sulla chiavetta USB dell'EASY view 3D.

Il file non deve essere salvato in una sottocartella.


Sulla chiavetta USB non devono essere presenti altri file .sdfp.

4.



Collegare la chiavetta USB all'EASY view 3D.

5.

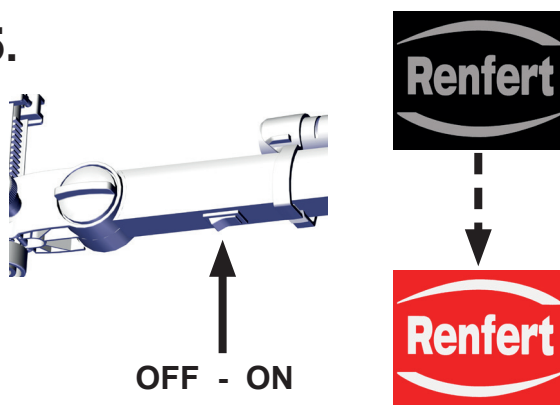


Spegnere ed accendere nuovamente EASY view 3D.

L'aggiornamento viene ora eseguito automaticamente e viene visualizzato con un logo Renfert animato di colore grigio.

L'aggiornamento è concluso quando il logo Renfert diventa rosso e EASY view 3D si riattiva automaticamente.

6.

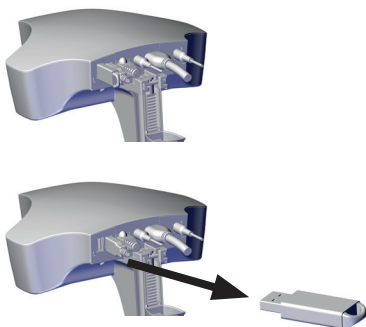

La procedura di aggiornamento è quindi conclusa.

E' ora possibile rimuovere la chiavetta USB.






making work easy

Anleitung • Instruction • Instruction • Istruzioni • Instrucciones  
Инструкцию


## EASY view 3D software update

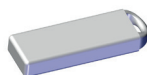

### 1. [www.renfert.de/.....](http://www.renfert.de/.....)



V1.0xx.zip

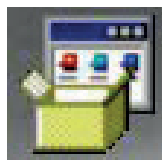

Abra y descomprima el archivo „V1\_0xx.zip“.


En la carpeta descomprimida se incluyen las instrucciones y la actualización del firmware.

### 2.



Conecte el lápiz de memoria USB al ordenador.

### 3.

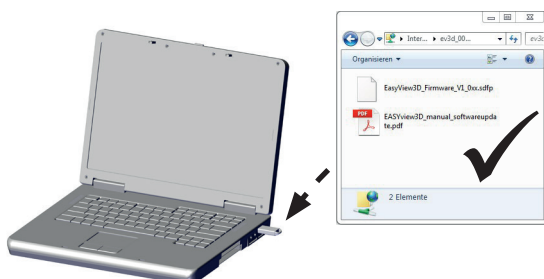


Copie el archivo con el nombre: „EasyView3D\_Firmware\_V1\_0xx.sdfp“ en el lápiz de memoria USB del EASY view 3D.

Este archivo no se debe copiar en ninguna subcarpeta.


En el lápiz de memoria no debe existir ningún otro archivo .sdfp.

4.

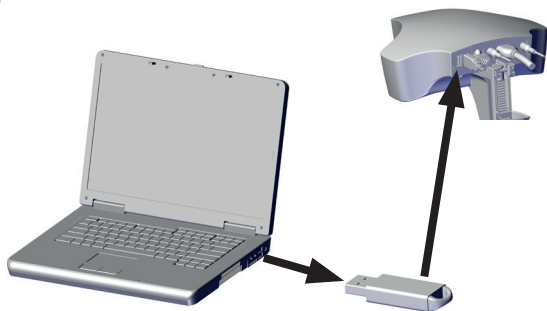

Conecte el lápiz de memoria USB al EASY view 3D.

5.

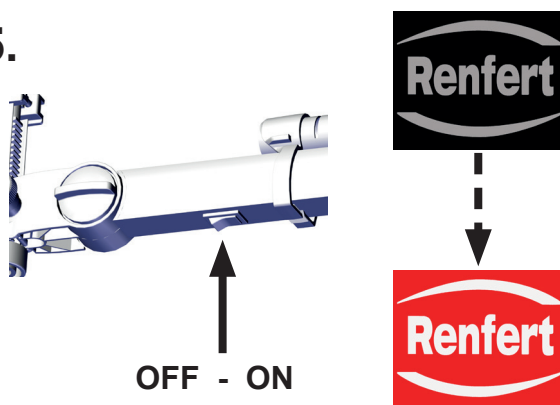


Apague y encienda de nuevo el EASY view 3D.

La actualización se instala ahora de manera automática y se indica mediante un logotipo gris y animado de Renfert.

La actualización habrá finalizado cuando el logotipo de Renfert se encuentre en color rojo y el EASY view 3D arranque de nuevo automáticamente.

6.

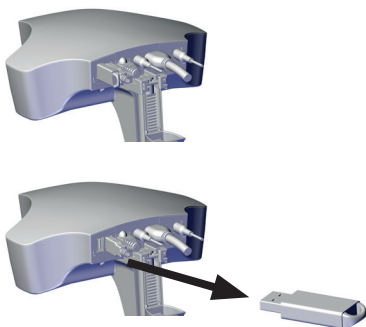

De esta forma, el proceso de actualización ha terminado.


Ahora puede retirar el lápiz de memoria USB.



making work easy

Anleitung • Instruction • Instruction • Istruzioni • Instrucciones  
Инструкцию


## EASY view 3D software update

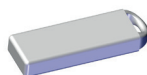

### 1. [www.renfert.de/.....](http://www.renfert.de/.....)



V1.0xx.zip

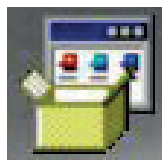

Файл .zip Datei „V1\_0xx.zip“ открыть и распаковать.


В распакованной папке находятся инструкция и обновление программного обеспечения.

### 2.



Подключить USB-накопитель к ноутбуку.

### 3.

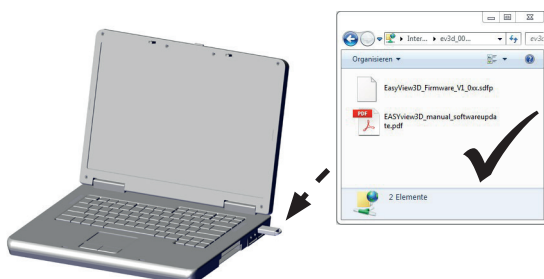


Файл с именем: „EasyView3D\_Firmware\_V1\_0xx.sdfp“ скопировать на USB-накопитель устройства EASY view 3D.

Файл не следует сохранять в какой-либо подпапке.


На USB-накопителе не должно быть никакого другого файла .sdfp.

4.

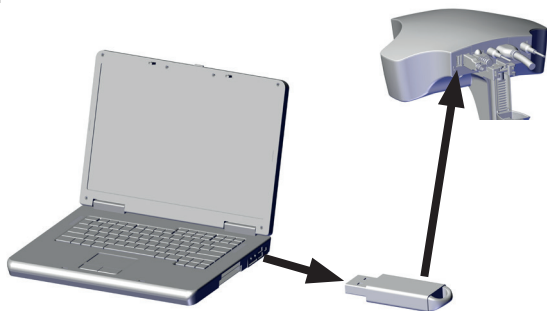

USB-накопитель подключить к устройству EASY view 3D.

5.

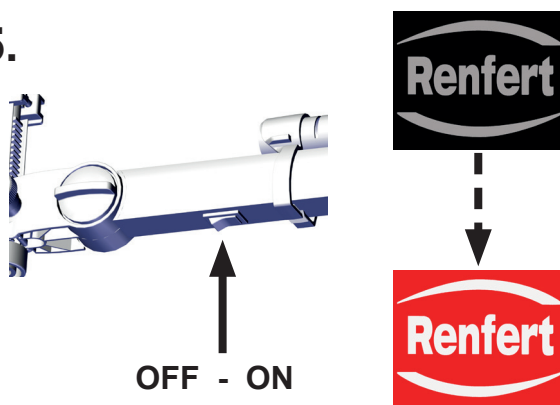


Устройство EASY view 3D выключить и включить вновь.

Обновление выполняется теперь автоматически и отображается с помощью анимированного серого логотипа Renfert.

Обновление завершено, если на логотипе Renfert появится красный цвет и EASY view 3D автоматически перезагрузится.

6.

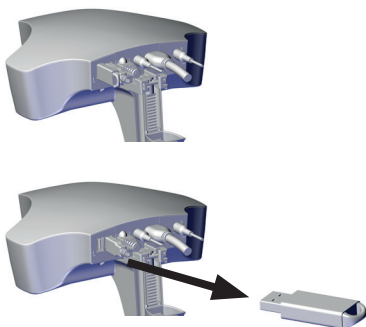

Процесс обновления тем самым завершен.

USB-накопитель теперь можно удалить.