

AMBARINO® *BioSeal*

Desensitizer

creamed

Angebot
1 kaufen + 1 gratis
offer
buy 1 + get 1 free

Für mehr Lebensqualität und jedes Alter

For a better quality of life and all ages



Wir arbeiten mit der Natur
We work with nature



(Natürlicher Rhabarber enthält Oxalsäure)
(Natural rhubarb contains oxalic acid)

Zahnempfindlichkeit

Empfindliche Zähne brauchen Pflege.

AMBARINO® BioSeal nutzt die Kraft ausgewählter natürlicher Inhaltsstoffe für eine sanfte, aber effektive Linderung der Schmerzempfindlichkeit.

Tooth sensitivity

Sensitive teeth require care.

AMBARINO® BioSeal utilizes the power of selected natural ingredients for gentle yet effective relief from pain sensitivity.

Desensibilisierungsmittel

- ◆ auf wässriger Basis
- ◆ keine organischen Lösungsmittel
- ◆ naturidentische Oxalsäure
- ◆ Kaliumnitrat
- ◆ keine reizende Wirkung auf Gewebe.

Desensitizing agent

- ◆ *water-base*
- ◆ *no organic solvents*
- ◆ *nature-identical oxalic acid*
- ◆ *potassium nitrate*
- ◆ *no irritating effect on tissue.*



Produktbeschreibung

AMBARINO® BioSeal ist ein auf wässriger Basis hergestelltes natürliches Desensibilisierungsmittel für die mehrfache zahnärztliche Anwendung und wird zum Verschluss freiliegender Dentinkanäle bei der Behandlung von überempfindlichen Zahnhälsen und besonders vor oder nach der Einwirkung von Bleichmitteln empfohlen.

Die enthaltenen wasserlöslichen Salze reagieren bei Kontakt mit der natürlichen Zahnschubstanz unter Abscheidung von wasserunlöslichen, säurestabilen Präzipitaten wie z.B. Calciumoxalat. Dabei werden die anorganischen Bestandteile des Zahnes in die Kristallbildung mit einbezogen und bewirken somit eine schnellwirkende Versiegelung und Anbindung an die natürliche Zahnstruktur. Offen liegende Dentintubuli werden dadurch auch in der Tiefe sehr effizient verschlossen.



AMBARINO® BioSeal is an aqueous-based natural desensitizing agent for multiple dental applications and is recommended for sealing exposed dentin canals in the treatment of hypersensitive tooth necks and especially before or after exposure to bleaching agents.

The water-soluble salts contained are reacting on contact with the natural tooth substance leading to water-insoluble, acid-stable precipitates such as calcium oxalate.

Product description



The inorganic components of the tooth are included in the crystal formation and thus create a fast-acting seal and bond to the natural tooth structure. Exposed dentinal tubules are thus also sealed very efficiently in depth.

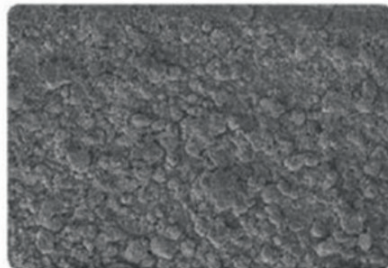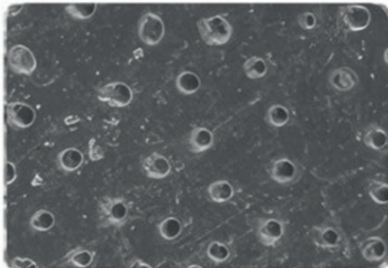

Dentintubuli
vor der Behandlung und nach
der Behandlung

*Dentin tubules
before treatment and after
treatment*



Angebot*: 1 kaufen + 1 gratis
Offer*: buy 1 + get 1 free

REF	Artikelbezeichnung / Item description	Preis (netto) / Price (net)
600312	AMBARINO® BioSeal 8 ml	119,00-€

Preis Angebot*

99,00 € (netto) + 1 gratis

Price offer*

99,00 € (net) + 1 free

* gültig bis: 31.08.2026

* valid until: 31.08.2026

