DINTELE

# UniBond LC

UniSystem

## Un singur flacon pentru orice procedură de adeziune.

Adeziv dentar universal, monocomponent, fotopolimerizabil.

01

### Chimie MDP

Acțiune autogravantă și adeziune la dinte și la materialele de restaurare.




ADEZIV UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZABIL

02

### Orice tehnică de gravare

Autogravare, gravare totală sau gravare selectivă a smalțului. Un singur adeziv pentru tehnica pe care o preferați.

FLACON
6 ml

03

### pH moderat 2,7

Blând cu dentina, asigurând totodată adeziunea la smalț.

04

### Capac acționat cu o mână

Se deschide prin rabatare și se dozează picătură cu picătură. Livrat în flacon de 6 ml.

CIFRE CHEIE

**Film de 3 µm**
Filmul subțire susține inserarea restaurării.

**≥ 20 MPa**
Chiar și la contaminarea cu salivă.

**6 ml**
Flacon de 6 ml


# Tolerant la umiditate. Adeziune universală.

Adeziv universal monocomponent, fotopolimerizabil, pe bază de chimie MDP. Pentru restaurări directe din compozit și compomer; reparații ale ceramicii, compozitului și metalului; cimentare indirectă cu ciment rășinic; și sigilarea zonelor hipersensibile ale dinților.

DATE DE MATERIAL ȘI MECANICE


### 20 MPa sau mai mult pe suprafețe uscate, umede și contaminate cu salivă

Forța de adeziune la forfecare, autogravare (MPa)

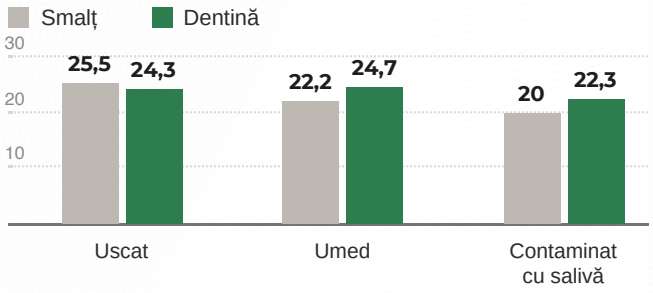


### Peste 28 MPa pe fiecare material de restaurare testat

Forța de adeziune (MPa)

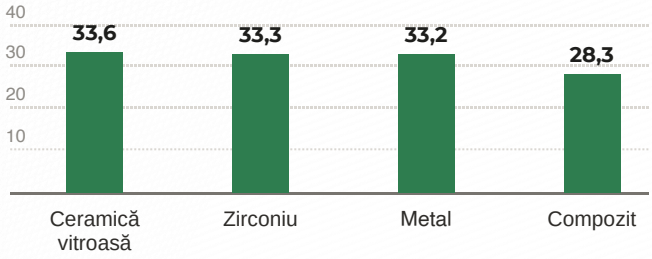


Rezultate de laborator.

| | |
|---|---|
| **Chimie** | Adeziv universal cu 10-MDP, monocomponent |
| **pH** | 2,7 |
| **Grosimea filmului** | 3 $\mu$m |
| **Adeziune: ceramică vitroasă / zirconiu / metal / compozit** | 33,6 / 33,3 / 33,2 / 28,3 MPa |
| **Adeziune după 5.000 de termocicluri** | 20,7 MPa |

| | |
|---|---|
| **Fotopolimerizare** | 10 s, > 800 mW/cm² |
| **Depozitare / termen de valabilitate** | 2–25 °C, ferit de lumină / 2 ani |
| **Ambalaj** | Flacon de 6 ml |
| **Contraindicații** | Pulpă expusă; alergie cunoscută la metacrilați |

## Protocol

### Pasul 1

**Aplicare prin frecare**
20 de secunde

### Pasul 2

**Uscare cu aer**
10–15 secunde

### Pasul 3

**Fotopolimerizare**
10 secunde

**UniPrime SA** restaurare **UniBond LC** dinte **UniCem DC** ciment

UniBond™ este o marcă MPF. Dispozitiv medical marcat CE. Exclusiv pentru uz stomatologic profesional. Citiți instrucțiunile de utilizare înainte de folosire.

DISTRIBUITOR AUTORIZAT
Logo și date de contact