CIMENTARE ADEZIVĂ

UniCem DC

Un ciment pentru restaurările indirecte.

Ciment rășinic bicomponent (pastă-pastă), cu polimerizare dublă.



01 Polimerizare dublă

Fotopolimerizare prin restaurări translucide. Autopolimerizare în zonele în care lumina nu ajunge.

02 Stabilitate la depozitare

Tehnologia redox PTHP limitează sensibilitatea la temperatură și polimerizarea prematură.

03 Îndepărtare ușoară a excesului

Fotopolimerizează excesul aproximativ 1 secundă, apoi îndepărtează-l în faza de gel.

04 Radioopac

Poate fi identificat pe radiografiile efectuate la controalele ulterioare.

CIMENT RĂȘINIC CU POLIMERIZARE DUALĂ

DATE PRINCIPALE

4 nuanțe disponibile

> 26 MPa

Rezistența adeziunii pe șase substraturi după 5.000 de cicluri termice.

≤ 1

Diferență de culoare înainte și după polimerizare.

8 g

Seringă automix de 8 g; patru nuanțe.

Dispozitiv medical cu marcaj CE. Exclusiv pentru uz profesional stomatologic.


Rezistență de durată.

Coroane, punți, inlay-uri, onlay-uri, fațete, toate tipurile de pivoți endodontici și reconstituiri de bont. Pentru restaurări din metal, metalo-ceramică, ceramică integrală, porțelan și compozit.

DATE DESPRE MATERIAL ȘI PROPRIETĂȚI MECANICE

Peste 26 MPa pe șase substraturi, inclusiv după 5.000 de cicluri termice

Rezistența adeziunii (MPa)

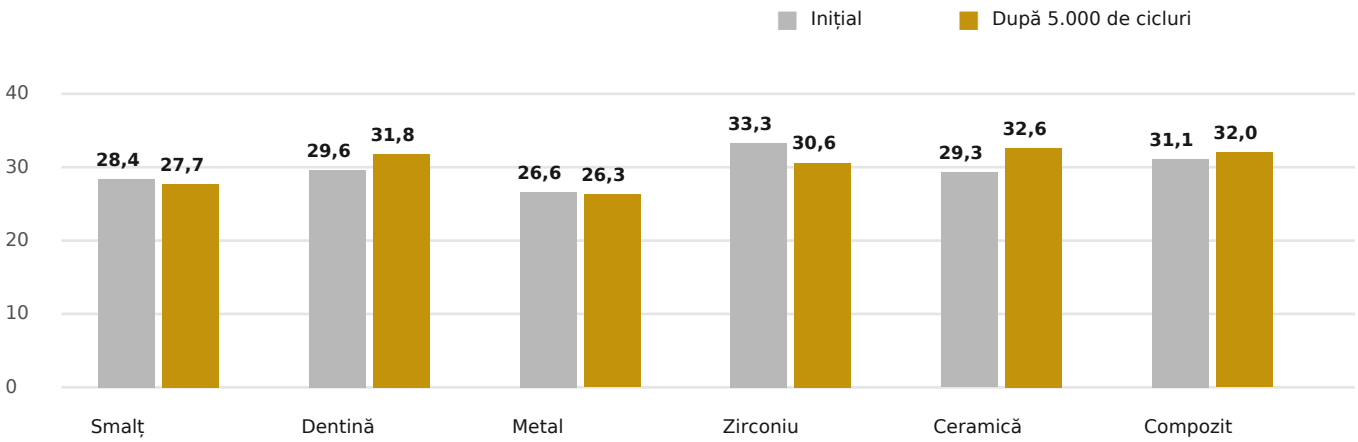

Rezultate obținute în laborator.

> 60 s

Timp de lucru la 23 °C

≤ 4,5 min

Timp de priză la 37 °C

20 s / 10 s

Fotopolimerizare pe suprafață (< 1000 / > 1000 mW/cm²)

01

13 săptămâni la 37 °C

A continuat să polimerizeze normal în testul de depozitare (tehnologie PTHP de autostabilizare).

02

Radioopac

Ușor de identificat radiologic la controalele ulterioare.

03

Cu UniPrime SA și UniBond LC

Un singur protocol, de la restaurare la dinte.

PROTOCOL

Pasul 1

Amestecare

Amestecă în raport 1:1. Utilizează o seringă automix bicamerală sau două seringi separate pentru amestecarea manuală.

Pasul 2

Poziționare

Poziționează restaurarea și îndepărtează excesul. Fotopolimerizează excesul aproximativ 1 secundă; îndepărtează-l în faza de gel.

Pasul 3

Polimerizare

Fotopolimerizează 10-20 de secunde sau lasă să se autopolimerizeze. Timp de priză ≤ 4,5 minute la 37 °C.

UniPrime SA: restaurarea • UniBond LC: dintele • UniCem DC: realizează cimentarea

UniCem™ este o marcă MPF. Dispozitiv medical cu marcaj CE. Exclusiv pentru uz profesional.
Citiți instrucțiunile de utilizare înainte de folosire.

DISTRIBUITOR AUTORIZAT

Logo și date de contact